

# 骨質疏鬆檢測系統操作手冊

## 注意！

使用者需要上傳 **PNG** 的圖片檔案格式以確保系統的準確性

## Step 1:

本系統以**股骨**作為檢測目標，因此使用者只需要從整張髋骨 X 光照片中把股骨部位截取出來即可。

以下為截取示範：

1．使用者可以利用任何有截取圖片功能的工具即可



## Step 2:

2. 以 Windows 內建的相片應用程式作為例子: 開啟圖片後按下

**ctrl+E**，然後點選最左邊的**裁切**。




然後，把裁切位置移動到股骨的位置，**需要清晰看到股骨部位**。



### Step 3:

完成後把圖片另存，以下是裁切後的示例：

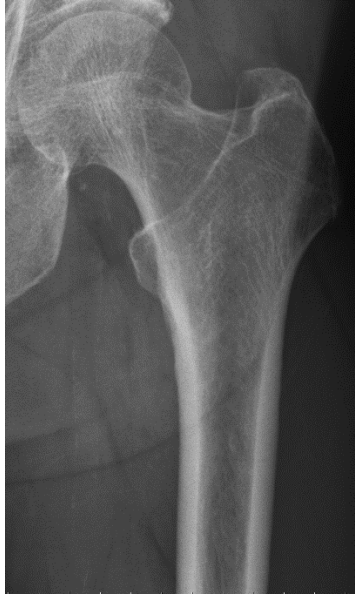

### Step 4:

點擊白色方塊，選取剛剛進行裁切的圖片，然後進行上傳即可。

歡迎使用骨質疏鬆檢測系統

使用者手冊



%E7%A4%BA%E4%BE%8B.png

上傳